



## 尿吸引チューブの取り付け

### (1) 本体ふたカバーをはずします。

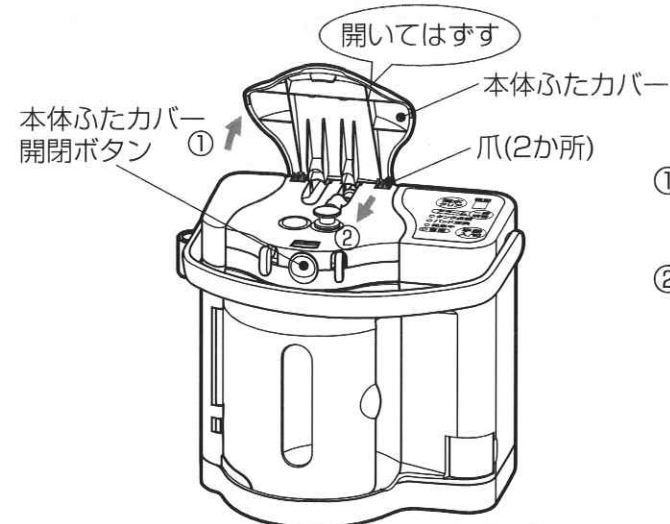

- ① 本体ふたカバー開閉ボタンを押して、本体ふたカバーを開きます。
- ② 本体ふたカバーの爪部を手前にはずすと上方に取りはずせます。

### (2) 尿吸引チューブ（接続ケース）を取り付けます。

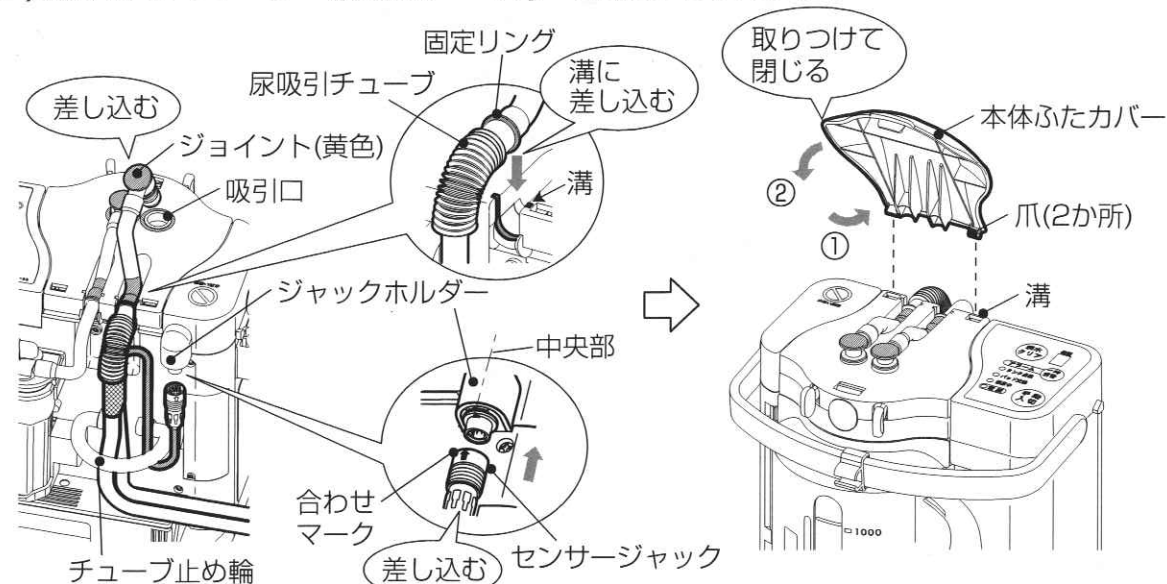


- ① センサージャックを接続します。
  - センサージャックの（↑）マークをジャックホルダーの中央部に 合わせて接続してください。
- ② 尿吸引チューブをチューブ止め輪の下から通し、ジョイント（黄色）を吸引口に止まるまでしっかりと差し込みます。
  - 尿吸引チューブが折れ曲がったりつぶれないように注意してください。
- ③ 本体ふたカバーの爪部（2か所）を本体の溝に取り付け、本体ふたカバーを「カチッ」と音がするまで抑えて閉じます。

#### 注意


- センサージャックの接続が不十分な場合、確認ランプ「1」が消灯しません。
- ジョイントの差し込みが不足していると吸引できません。しっかりと押し込んでください。
- 尿吸引チューブの固定リングは必ず本体の溝に差し込んで固定してください。

## 尿タンクの取り付け

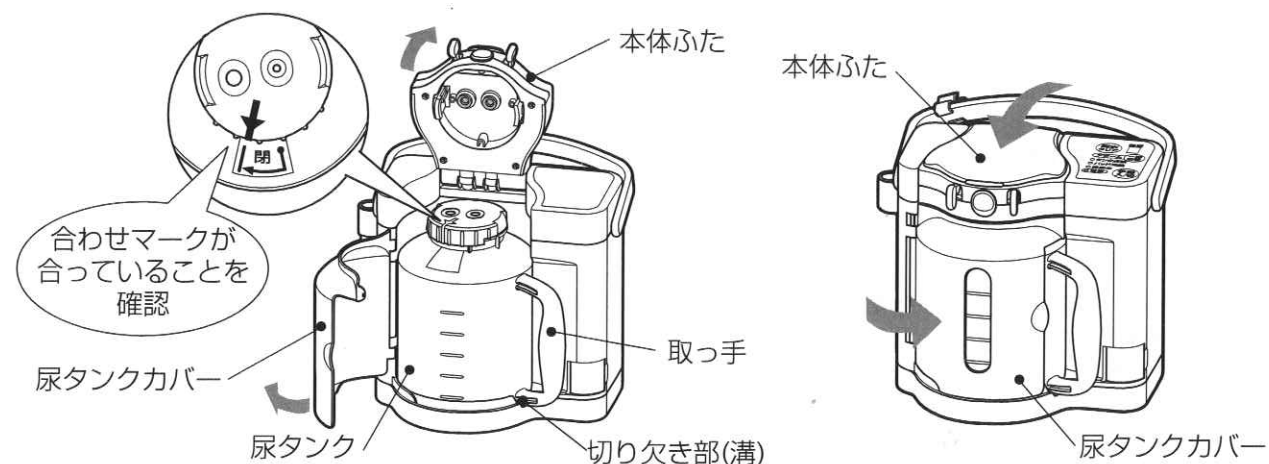

- ① 本体ふたと尿タンクカバーを開いて尿タンクを取り付けます。
  - 尿タンクの取っ手が本体右側の切り欠き部（溝）にくるように取り付けます。
- ② 尿タンクカバーと本体ふたを閉じます。
  - 本体ふたは「カチッ」と音がするまでしっかりと押し下げます。

## チューブホルダーの取り付け

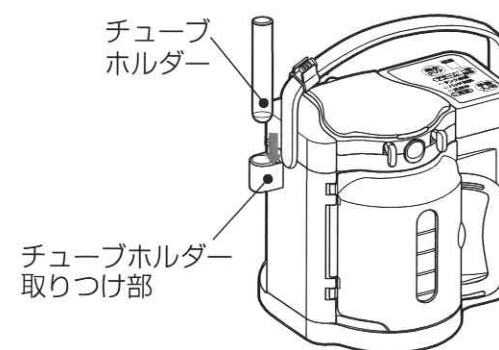

- ① チューブホルダーはチューブホルダー 取り付け部に差し込みます。

## 動作の確認


ヒューマニー[本体]に取り付け後、ヒューマニー[本体]の「取扱説明書」9ページ「電源アダプターの接続」、11ページ「接続ケースの取り付け」にしたがい次の確認をしてください。

### ①尿吸引パッドの接続確認。

- 電源アダプタを接続し、電源スイッチを「入」にして、確認ランプ「1」を点滅させます。(アラーム音が鳴りますので、「アラーム一時消音」ボタンを押してアラーム音を停止させます。)
- 尿吸引パッドを接続ケースに取り付け、確認ランプ「1」の消灯を確認します。

### ②吸引確認。

- 空のタンクを取り付け、手動運転でバケツなどの容器にためた水(水道水)を尿吸引チューブで直接吸引します。
- 連続20秒間の吸引で、500～600ml吸引すれば正常です。

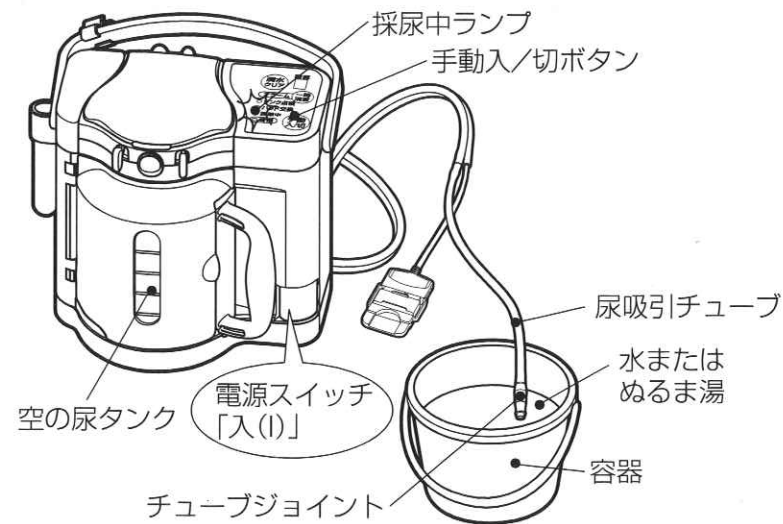

### ③尿タンク水位センサ、フロートセンサの確認。

- 吸引確認と同様に、手動運転で水を吸引し、約800mlでタンク点検ランプが点滅してアラーム音が鳴ることを確認します。
- 引き続き水を吸引して、約1000mlで確認ランプ「3」が点滅してポンプが自動停止することを確認します。(アラーム音は連続して鳴ります。)
- 尿タンクを本体から取りはずし、「満水クリア」ボタンを押して解除します。

※動作確認で、確認ランプが消灯しなかったり、点滅しない場合は、ヒューマニー[本体]の取扱説明書「『故障かな』と思ったときは」をご覧ください。

## 廃棄するときのお願い

ご使用済み「チューブタンクセット」の廃棄に際しては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。

販売元: **ユニ・チャーム ヒューマンケア株式会社**  
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23


製造元: **株式会社 日立製作所**  
〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

## 尿吸引ロボヒューマニー [本体] レンタル用 HU-1000R1R専用 ヒューマニーチューブタンクセット HU-ST01説明書

お買い上げありがとうございます。

本「チューブタンクセット」は、ヒューマニー[本体]レンタル用HU-1000R1R専用です。説明書の取り付け方に従い、ヒューマニー[本体]に取り付けてご使用ください。ご使用前に機器本体の取扱説明書と共によくお読みになり、正しくご使用ください。

## チューブタンクセット各部品の名称

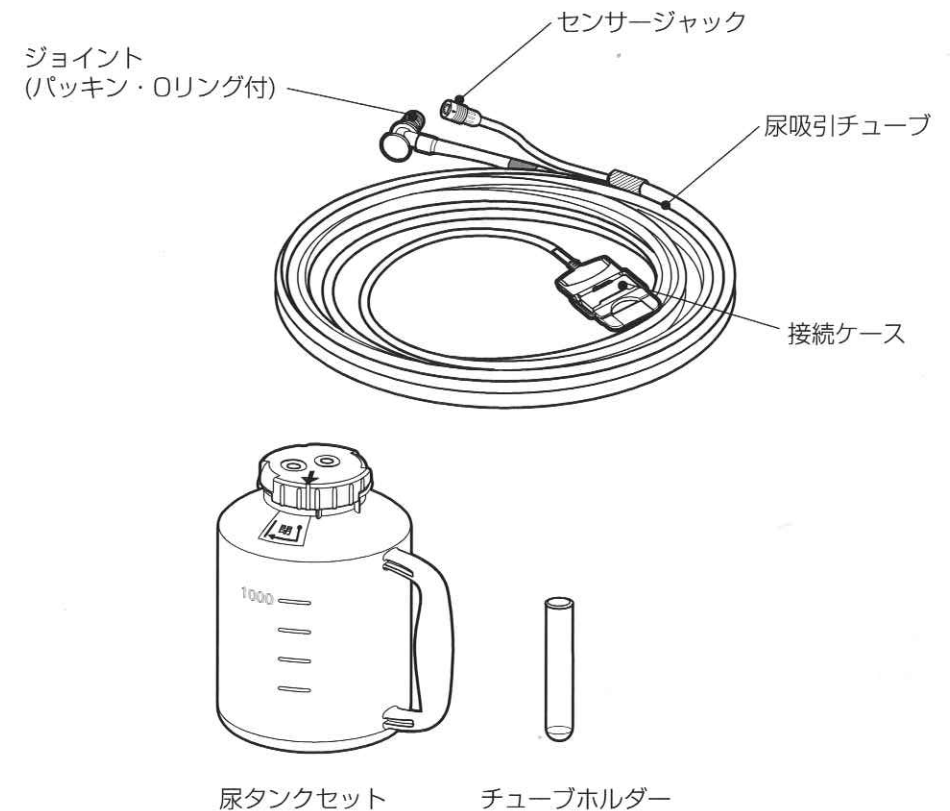

## 付属品

- ・説明書(本書)
- ・別冊「①初めて使う方のために」
- ・別冊「②上手にお使いいただくために」